


OPTIMAX®
optimum vision - maximum comfort

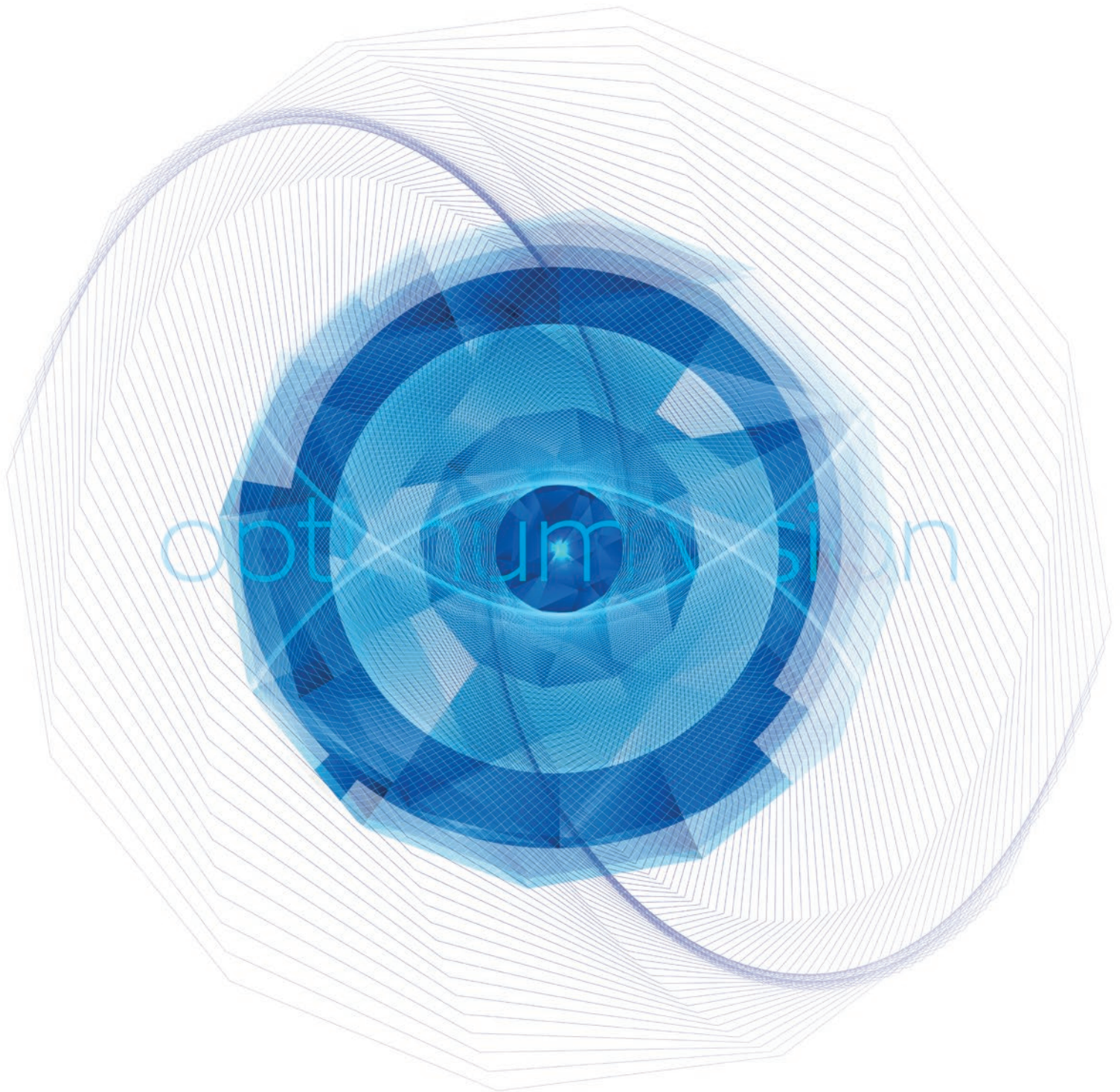

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ | ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ
www.optimax.gr

Η ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

ECOSYSTEM ALLinONE (360ml & 100ml)
Υγρό καθαρισμού

IDEAL UNICA (380ml)
Υγρό καθαρισμού

ECOSYSTEM Peroxide (360ml)
Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

ECOSYSTEM Conditioner (250ml)
Υγρό καθαρισμού
ECOSYSTEM Cleaner (60ml)
Σαπουνάκι καθαρισμού



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ECOSYSTEM Saline (550ml)
Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα



ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ECOSYSTEM Eye Drops (15ml)
Ενυδατικές Οφθαλμικές σταγόνες




MADE IN
ITALY

OPTIMAX
optimum vision - maximum comfort

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Συχνής Αντικατάστασης

- 5 OPTIMAX SILICONE 1DAY
- 7 OPTIMAX HYALURON 1DAY
- 9 OPTIMAX SILICONE
- 10 OPTIMAX SILICONE for ASTIGMATISM
- 11 OPTIMAX SILICONE RX
- 12 OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA
- 15 OPTIMAX HYALURON
- 16 OPTIMAX HYALURON for ASTIGMATISM
- 17 OPTIMAX HYALURON RX
- 27 ECOSYSTEM OXYGEN
- 29 IDEAL ASPHERIC

Έγχρωμοι

- 19 QUEEN'S SOLITAIRE
- 20 QUEEN'S TWINS
- 21 QUEEN'S TRILOGY
- 22 QUEEN'S ONE – FUN & LOOK

Συμβατικοί Μαλακοί

- 23 OPTIMAX PROJECT RX
- 23 OPTIMAX PROJECT TORIC RX

Σκληροί Αεροδιαπερατοί (ημίσκληροι)

- 24 OPTIMAX GP

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

- 26 ECOSYSTEM ALL in ONE – Υγρό Φροντίδας Μαλακών Φακών
- 28 IDEAL UNICA – Υγρό Φροντίδας Μαλακών Φακών
- 30 ECOSYSTEM PEROXIDE – Διάλυμα Υπεροξειδίου του Υδρογόνου
- 31 ECOSYSTEM CONDITIONER – Υγρό Φροντίδας Σκληρών Φακών
- ECOSYSTEM CLEANER – Σαπουνάκι Καθαρισμού Σκληρών Φακών
- ECOSYSTEM SALINE – Φυσιολογικό Αλατούχο Διάλυμα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ

- 34 Μάσκα ματιών The Eye Doctor Essential
- 35 Αυτοθερμενόμενη μάσκα ματιών The Eye Doctor Click & Go
- 36 Μαντηλάκια Καθαρισμού Βλεφάρων The Eye Doctor Eyelid Wipes
- 37 Οφθαλμικές Σταγόνες ECOSYSTEM Eye Drops

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

- 38 Βεντουζάκια, Θήκες
- 39 Αξεσουάρ, Schirmer, Φλουορεσκεΐνη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

	Όνομασία Φακού	Ακτίνα Καμπυλότητας	Διάμετρος	Διοπτρίες
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ	OPTIMAX SILICONE 1DAY	8.60	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +8.00 (0.50)
	OPTIMAX HYALURON 1DAY	8.60	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)
ΜΗΝΙΑΙΟΙ	OPTIMAX SILICONE	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +8.00 (0.50)
	OPTIMAX SILICONE for Astigmatism	8.60	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)
	OPTIMAX SILICONE RX	8.00 έως 9.20 (ανά 0.05)	13.0 έως 15.5 (ανά 0.10)	-20.00 έως +20.00 (ανά 0.25)
	OPTIMAX SILICONE RX for Astigmatism	8.00 έως 9.90 (ανά 0.05)	12.5 έως 17.0 (ανά 0.10)	-20.00 έως +20.00 (ανά 0.25)
	OPTIMAX SILICONE for Presbyopia	8.60	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)
	OPTIMAX HYALURON	8.60, 8.90	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +12.00 (0.50)
	OPTIMAX HYALURON for Astigmatism	8.60	14.2	-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)
	OPTIMAX HYALURON RX	7.00 έως 9.90 (ανά 0.05)	11.0 έως 17.0 (ανά 0.10)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)
	OPTIMAX HYALURON RX for Astigmatism	7.00 έως 9.90 (ανά 0.05)	11.0 έως 17.0 (ανά 0.10)	-30.00 έως +30.00 (ανά 0.25)
	ECOSYSTEM OXYGEN	8.60	14.1	-1.00 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -10.00 (0.50)
	IDEAL ASPHERIC	8.60	14.2	-0.75 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -15.00 (0.50) +1.00 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)
ΕΓΧΡΩΜΟΙ	QUEEN'S SOLITAIRE Τριμηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)
	QUEEN'S SOLITAIRE TORIC Τριμηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)
	QUEEN'S SOLITAIRE MULTIFOCAL Τριμηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -10.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)
	QUEEN'S TWINS Μηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)
	QUEEN'S TRILOGY Μηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)
	QUEEN'S TRILOGY TORIC Μηνιαίοι	8.60	14.2	Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -15.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)
	QUEEN'S FUN&LOOK Ημερήσιοι	8.60	14.2	Plano
	QUEEN'S ONE Ημερήσιοι	8.60	14.2	Plano
ΕΤΗΣΙΟΙ	OPTIMAX PROJECT RX	7.00 έως 9.90 (ανά 0.05)	11.0 έως 15.5 (ανά 0.10)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)
	OPTIMAX PROJECT TORIC RX	7.00 έως 9.90 (ανά 0.05)	11.0 έως 15.5 (ανά 0.10)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)

ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Κύλινδρος	Άξονας	Πρεσβυωπική Ισχύ Add	Χρώματα	Συσκευασία	
				30 φακοί	σελ. 5
				30 φακοί	σελ. 7
				3 φακοί	σελ. 9
-0.75, -1.25 -1.75, -2.25, -2.75	10 έως 180 (10°)			3 φακοί	σελ. 10
				3 φακοί	σελ. 11
-0.25 έως -8.00 (ανά 0.25)	1 έως 180 (ανά 1°)			3 φακοί	σελ. 11
		+1.00, +1.50 +2.00, +2.50		3 φακοί	σελ. 12
				3 φακοί	σελ. 15
-0.75, -1.25 -1.75, -2.25	10 έως 180 (10°)			3 φακοί	σελ. 16
				3 φακοί	σελ. 17
-0.25 έως -8.00 (ανά 0.25)	1 έως 180 (ανά 1°)			3 φακοί	σελ. 17
				6 φακοί	σελ. 27
				6 φακοί	σελ. 29
			Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue, Light Green, Jade, Violet, Spice	2 φακοί	σελ. 19
-0.75, -1.25, -2.00, -2.75, -3.50	5 έως 180 (5°)		Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue, Light Green, Jade, Violet, Spice	2 φακοί	σελ. 19
		+2.75	Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue, Light Green, Jade, Violet, Spice	2 φακοί	σελ. 19
			Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue, Light Green, Jade, Violet, Spice	2 φακοί	σελ. 20
			Pearl, Blue, Ocean, Dark Green, Light Green, Choco, Yellow, Amber	2 φακοί	σελ. 21
-0.75, -1.25, -2.00, -2.75, -3.50	5 έως 180 (5°)		Pearl, Blue, Ocean, Dark Green, Light Green, Choco, Yellow	2 φακοί	σελ. 21
			Solid Red, Solid White, Solid Black, Cat Eyes, Cat Eyes Yellow, Yellow Twilight, Red Viper, Vampire Queen	5 φακοί	σελ. 22
			Pearl, Blue, Green, Choco	10 φακοί	σελ. 22
				1 φακός	σελ. 23
-0.25 έως -7.00 (ανά 0.25)	1 έως 180 (ανά 1°)			1 φακός	σελ. 23

*συνοπτικός κατάλογος σκληρών φακών επαφής στη σελ. 24

SILICONE family

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

υψηλής διαπερατότητας οξυγόνου



-12.00
έως
+8.00


μοναδικά προνόμια για τα μάτια σας!


O₂^{extra} Oxygen

SILICONE 1 DAY

Ημερήσιας Αντικατάστασης

Οι **OPTIMAX SILICONE 1DAY** αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στους ημερήσιους φακούς επαφής σιλικόνης υδρογέλης, παρέχοντας άνεση, οξυγόνωση και ενυδάτωση.

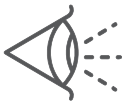

ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου για λευκά και υγιή μάτια που αναπνέουν ελεύθερα.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	45%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	-0.50 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.50 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +8.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	130
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Ημερήσια
Συσκευασία	30 τεμάχια

HYALURON family
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
με υαλουρονικό & φίλτρα uv




η καθημερινή σας...
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

HYALURON 1 DAY

Ημερήσιας Αντικατάστασης

Οι **OPTIMAX HYALURON 1DAY** είναι ημερήσιοι φακοί επαφής υδρογέλης με προσθήκη υαλουρονικού κατάλληλοι για ξηρά και ευαίσθητα μάτια.

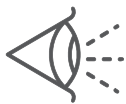

ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διατήρηση υγρασίας για αίσθηση άνεσης ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Bioxifilcon A
Περιεκτικότητα σε νερό	58%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	-0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +6.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	27
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Ημερήσια
Συσκευασία	30 τεμάχια

SILICONE family

ΜΗΝΙΑΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

υψηλής διαπερατότητας οξυγόνου



4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ADDITION
Add +1.00, +1.50, +2.00, +2.50

for PRESBYOPIA

OPTIMAX[®]
optimum vision - maximum comfort

High definition breathable soft monthly contact lenses

SILICONE

for MYOPIA

OPTIMAX[®]
optimum vision - maximum comfort

High definition breathable soft monthly contact lenses

SILICONE

for ASTIGMATISM

OPTIMAX[®]
optimum vision - maximum comfort

High definition breathable soft monthly contact lenses

SILICONE

ΕΩΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ -2.75
CYL -0.75, -1.25, -1.75, -2.25
AXIS 10° - 180° (10°)

-12.00
έως
+6.00

-12.00
έως
+8.00


-12.00
έως
+6.00

SILICONE

Μηνιαίας Αντικατάστασης

Οι **OPTIMAX SILICONE** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας γενιάς.

Είναι διαθέσιμοι σε σφαιρικούς, αστιγματικούς, πολυεστιακούς και ειδικές κατασκευές.

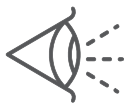

ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου για λευκά και υγιή μάτια που αναπνέουν ελεύθερα.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	45%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +8.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	119
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια


SILICONE for ASTIGMATISM

Μηνιαίας Αντικατάστασης

ΕΩΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
-2,75

Οι **OPTIMAX SILICONE for ASTIGMATISM** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής σιλικόνης υδρογέλης κατάλληλοι για την διόρθωση του αστιγματισμού.

Προσφέρουν σταθερή όραση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την πρώτη εφαρμογή.

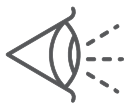

ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου για λευκά και υγιή μάτια που αναπνέουν ελεύθερα.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	45%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Σφαιρική ισχύς (SPH)	Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +6.00 (0.50)
Κυλινδρική ισχύς (CYL)	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75
Άξονας	10 έως 180 (ανά 10°)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	75
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

SILICONE (Rx)

Μηνιαίας Αντικατάστασης



Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	74%
Καμπυλότητα (BC)	8.00 έως 9.20 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	13.0 έως 15.5 mm (ανά 0.10)
Ισχύς (POWER)	-20.00 έως +20.00 (ανά 0.25)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	75
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

Οι μηνιαίοι φακοί επαφής **OPTIMAX SILICONE RX** μπορούν να εξατομικευτούν για να εφαρμόζονται σε κάθε μάτι. Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας δοκιμαστικού ζεύγους με συμβολική χρέωση.

SILICONE (Rx) for ASTIGMATISM

Μηνιαίας Αντικατάστασης



Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	74%
Καμπυλότητα (BC)	8.00 έως 9.90 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	12.5 έως 17.0 mm (ανά 0.10)
Σφαιρική Ισχύς (SPH)	-20.00 έως +20.00 (ανά 0.25)
Κυλινδρική Ισχύς (CYL)	-0.25 έως -8.00 (ανά 0.25)
Άξονας	1 έως 180 (ανά 1°)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	75
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

Οι μηνιαίοι φακοί επαφής **OPTIMAX SILICONE RX for ASTIGMATISM** μπορούν να εξατομικευτούν για να εφαρμόζονται σε κάθε μάτι καλύπτοντας και αστιγματισμό. Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας δοκιμαστικού ζεύγους με συμβολική χρέωση.

SILICONE for PRESBYOPIA

Μηνιαίας Αντικατάστασης

Οι **OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής σιλικόνης υδρογέλης κατάλληλοι για την διόρθωση της πρεσβυωπίας.

Προσφέρουν καθαρή και σταθερή όραση σε όλες τις αποστάσεις.



ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου για λευκά και υγιή μάτια που αναπνέουν ελεύθερα.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	45%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Σφαιρική ισχύς (SPH)	Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +6.00 (0.50)
Πρεσβυωπική ισχύς (ADD)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	100
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι **OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA** είναι διαθέσιμοι για την διόρθωση μυωπίας έως -12.00 διοπτρίες και υπερμετρωπίας έως +6.00 διοπτρίες. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η επιλογή μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών addition για την κοντινή όραση +1.00, +1.50, +2.00, +2.50. Περισσότερες επιλογές ισούται με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Κατά την επιλογή των παραμέτρων του αρχικού φακού απλά ακολουθούμε την συνταγή γυαλιών.

1. Επιλέγουμε το σφαιρικό ισοδύναμο διορθώνοντας για την απόσταση vertex (σιγουρεύουμε ότι έχουμε πρόσφατη συνταγή γυαλιών)
2. Επιλέγουμε το ελάχιστο δυνατό add σύμφωνα με την συνταγή γυαλιών
3. Παραγγέλνουμε τους δοκιμαστικούς πολυεστιακούς φακούς επαφής

Όταν έρθουν οι φακοί επαφής ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Εφαρμόζουμε τους φακούς επαφής στον ασθενή και περιμένουμε 10 λεπτά
2. Ελέγχουμε διόφθαλμα την οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά (σε συνθήκες κανονικού φωτισμού)
3. Ελέγχουμε την κινητικότητα και την επικέντρωση του φακού στο μάτι

Αν είμαστε ικανοποιημένοι επανεξετάζουμε τον ασθενή μετά από δέκα μέρες

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που απαιτούμε βελτίωση στην κοντινή όραση:

- Επιλέγουμε το αμέσως υψηλότερο addition
- Αν είμαστε ήδη στο υψηλότερο add στην επιδιάθλαση προσθέτουμε βήματα +0.25 στο μη κυρίαρχο μάτι και ελέγχουμε διόφθαλμα την επίδραση στην μακρινή και την κοντινή όραση
- Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά addition μεταξύ των δύο ματιών (συνήθως επιλέγοντας το ισχυρότερο add στον μη κυρίαρχο οφθαλμό)


Σε περίπτωση που απαιτούμε βελτίωση στην μακρινή όραση:

- Επιλέγουμε το αμέσως χαμηλότερο addition
- Προσθέτουμε βήματα -0.25 στο κυρίαρχο μάτι και ελέγχουμε διόφθαλμα την επίδραση στην μακρινή και την κοντινή όραση
- Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά addition μεταξύ των δύο ματιών (συνήθως επιλέγοντας το χαμηλότερο add στον κυρίαρχο οφθαλμό)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λόγω της καινοτόμου γεωμετρίας κοπής των πολυεστιακών φακών **OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA** η συμπεριφορά του κέντρου βάρους είναι παρόμοια με αυτή ενός υπερμετρωπικού φακού επαφής. Για τον παραπάνω λόγο αν υπάρξει δυσκολία κατά την αφαίρεση συστήνετε πρώτα το σύρσιμο του φακού στον επιπεφυκότα και μετέπειτα το τσίμπημα του φακού με τα δάκτυλα.

HYALURON family
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
με υαλουρονικό & φίλτρα uv

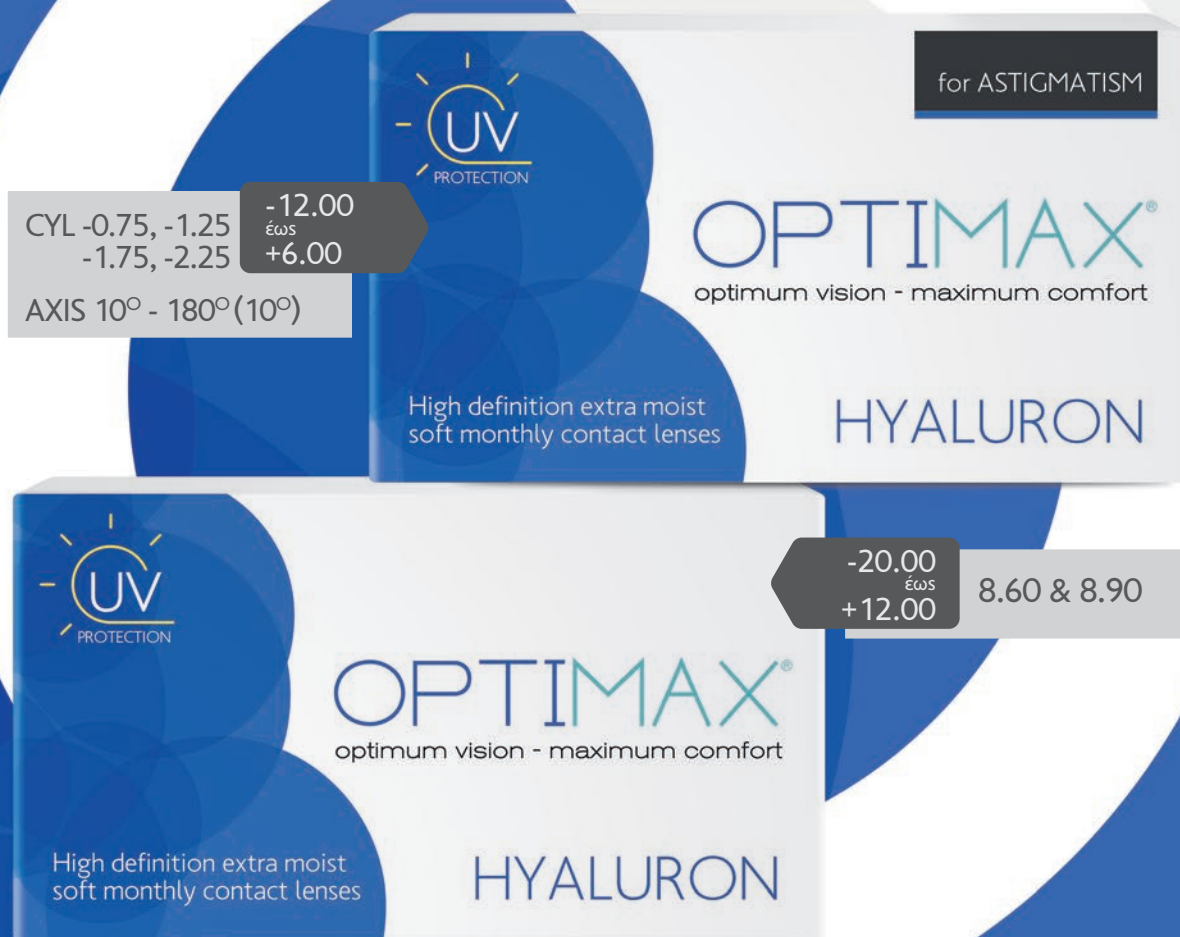

OPTIMAX®
optimum vision - maximum comfort

HYALURON


Μηνιαίας Αντικατάστασης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ
ΚΑΙ ΣΕ **8.90**

ΑΠΟ **-20.00**
ΕΩΣ **+12.00**

Οι **OPTIMAX HYALURON** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής υδρογέλης με διευρυμένη γκάμα καλύπτοντας και υψηλές αμετρωπίες, μυωπία έως -20.00 Dpt και υπερμετρωπία έως +12.00 Dpt.

Ετοιμοπαράδοτοι σε δύο καμπυλότητες 8.60 και 8.90. Είναι διαθέσιμοι σε σφαιρικούς, αστιγματικούς και ειδικές κατασκευές.

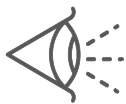

ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διατήρηση υγρασίας για αίσθηση άνεσης ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	55%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm, 8.90 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	-0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +12.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	25
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

HYALURON for ASTIGMATISM

Μηνιαίας Αντικατάστασης

Οι **OPTIMAX HYALURON for ASTIGMATISM** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής με ενσωματωμένη προστασία UV, κατάλληλοι για την διόρθωση του αστιγματισμού.

Προσφέρουν καθαρή και σταθερή όραση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την πρώτη εφαρμογή.



ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Ασφαιρικός σχεδιασμός για καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διατήρηση υγρασίας για αίσθηση άνεσης ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Ενσωματωμένα φίλτρα UV για προστασία από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	55%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Σφαιρική ισχύς (SPH)	Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +6.00 (0.50)
Κυλινδρική ισχύς (CYL)	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Άξονας	10 έως 180 (ανά 10°)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	23
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

HYALURON (Rx)

Μηνιαίας Αντικατάστασης



Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	58%
Καμπυλότητα (BC)	7.00 έως 9.90 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	11.0 έως 17.0 mm (ανά 0.10)
Ισχύς (POWER)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	26
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

Οι μηνιαίοι φακοί επαφής OPTIMAX HYALURON RX μπορούν να εξατομικευτούν για να εφαρμόζονται σε κάθε μάτι. Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας δοκιμαστικού ζεύγους με συμβολική χρέωση.

HYALURON (Rx) for ASTIGMATISM

Μηνιαίας Αντικατάστασης



Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	58%
Καμπυλότητα (BC)	7.00 έως 9.90 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	11.0 έως 17.0 mm (ανά 0.10)
Σφαιρική Ισχύς (SPH)	-30.00 έως +30.00 (ανά 0.25)
Κυλινδρική Ισχύς (CYL)	-0.25 έως -8.00 (ανά 0.25)
Άξονας	1 έως 180 (ανά 1°)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	26
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	3 τεμάχια

Οι μηνιαίοι φακοί επαφής OPTIMAX HYALURON RX for ASTIGMATISM μπορούν να εξατομικευτούν για να εφαρμόζονται σε κάθε μάτι καλύπτοντας και αστιγματισμό. Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας δοκιμαστικού ζεύγους με συμβολική χρέωση.

SOLITAIRE TWINS TRILOGY
ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Love Your Eyes...

♡ ΧΟΧΟ


QUEEN'S™
BEAUTY LENSES

SOLITAIRE

Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 1Tone

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ

Οι **Queen's Solitaire** είναι φακοί επαφής τριμηνιαίας αντικατάστασης που παρέχουν φυσικό και αξεπέραστο αποτέλεσμα. Αλλάζουν το χρώμα των ματιών αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το φυσικό τους περίγραμμα.

Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση και ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν αυξημένη άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως ±20.00 διοπτρίες. Είναι διαθέσιμοι και με αστιγματισμό καλύπτοντας κυλίνδρους έως -3.50 διοπτρίες.



	Σφαιρικοί	Πολυεστιακοί	Αστιγματικοί
Υλικό	Polymacon	Polymacon	Ocufilcon
Περιεκτικότητα σε νερό	38%	38%	43%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm	8.60 mm	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.0 mm	14.0 mm	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	SPH Plano -0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +20.00 (0.50)	SPH Plano -0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -10.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +15.00 (0.50) ADD +2.75	SPH Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -12.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +15.00 (0.50) CYL -0.75, -1.25, -2.00, -2.75, -3.50 AXIS 5 έως 180 (ανά 5°)
Αντικατάσταση	Τριμηνιαία	Τριμηνιαία	Τριμηνιαία
Συσκευασία	2 τεμάχια	2 τεμάχια	2 τεμάχια

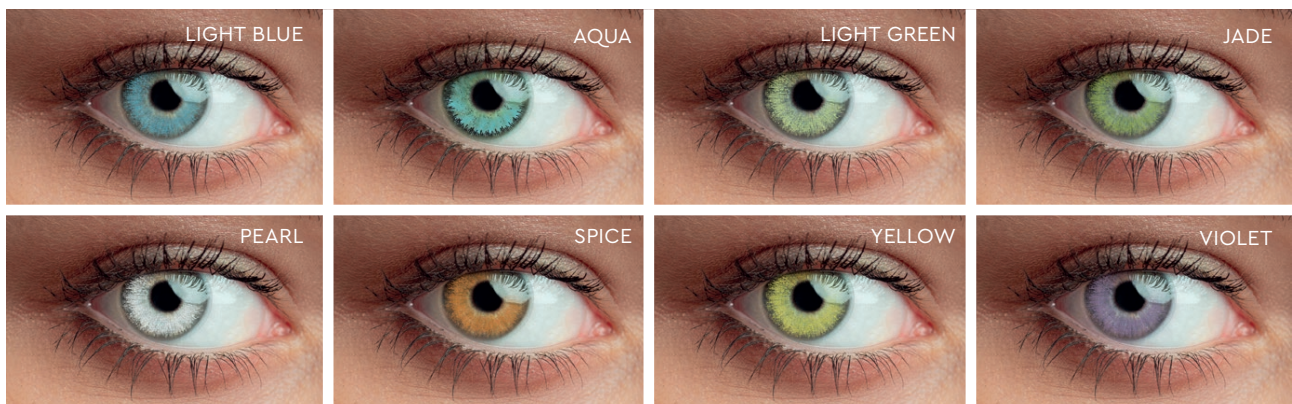

TWINS

Μηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 2Tone

Οι **Queen's Twins** είναι μία κλασική σειρά φακών επαφής μηνιαίας αντικατάστασης που δίνουν ένα ρομαντικό άγγιγμα στο βλέμμα σας. Το χρώμα πλαισιώνεται από περίγραμμα, δίνοντας έντονη λάμψη που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση και ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν αυξημένη άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως ±20.00 διοπτρίες.



Υλικό	Polymacon
Περιεκτικότητα σε νερό	38%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	Plano -0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -8.00 (0.50) +0.25 έως +4.00 (0.25)
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	2 τεμάχια




TRILOGY

Μηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 3Tone

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

Οι **Queen's Trilogy** είναι μία σειρά φακών επαφής μηνιαίας αντικατάστασης που προσδίδουν αξία στις προσωπικές σας στιγμές. Η σειρά αλλάζει το χρώμα, τονίζει το περίγραμμα, και προσδίδει βάθος στη κόρη, χάρη στη τεχνολογία 3tone. Τρεις λεπτές αποχρώσεις συνώνυμες της κομψότητας. Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση και ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν αυξημένη άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως ± 20.00 διοπτρίες. Είναι διαθέσιμοι και με αστιγματισμό καλύπτοντας κυλίνδρους έως -3.50 διοπτρίες.

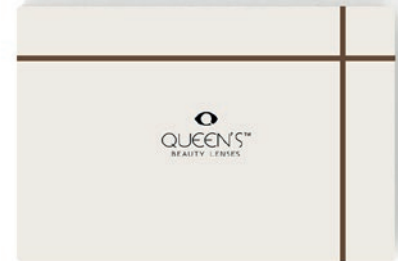

	Σφαιρικοί	Αστιγματικοί
Υλικό	Ocufilcon	Ocufilcon A
Περιεκτικότητα σε νερό	43%	43%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	SPH Plano -0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -20.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +20.00 (0.50)	SPH Plano έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -15.00 (0.50) +0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +15.00 (0.50) CYL -0.75, -1.25, -2.00, -2.75, -3.50 AXIS 5 έως 180 (ανά 5°)
Αντικατάσταση	Μηνιαία	Μηνιαία
Συσκευασία	2 τεμάχια	2 τεμάχια



ONE

Ημερήσιοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 3Tone

Οι **QUEEN'S ONE** είναι έγχρωμοι φακοί επαφής ημερήσιας αντικατάστασης, χωρίς βαθμό. Κατάλληλοι για όσους επιθυμούν συχνές αλλαγές του χρώματος των ματιών για το τέλειο ταίριασμα με την εκάστοτε εμφάνιση και διάθεση.

Υλικό	Methafilcon
Περιεκτικότητα σε νερό	55%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	Plano
Αντικατάσταση	Ημερήσια
Συσκευασία	10 τεμάχια



BLUE



CHOCO



GREEN




PEARL

FUN & LOOK


Ημερήσιοι Αποκριάτικοι

Οι **QUEEN'S FUN&LOOK** είναι μια ιδιαίτερη σειρά ημερησίων φακών επαφής, χωρίς βαθμό, για τις περιόδους των Αποκριών και του Halloween!

Υλικό	Polyhema
Περιεκτικότητα σε νερό	43%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	Plano
Αντικατάσταση	Ημερήσια
Συσκευασία	5 τεμάχια

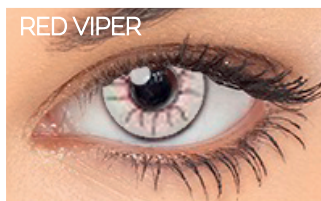

RED VIPER

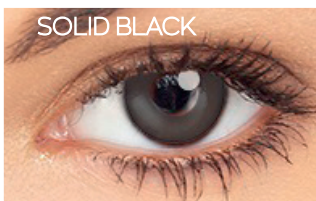

SOLID BLACK



SOLID WHITE



SOLID RED



YELLOW TWILIGHT



CAT EYE YELLOW



CAT EYE



VAMPIRE QUEEN

PROJECT (Rx)

Ετήσιας Αντικατάστασης



Οι **OPTIMAX PROJECT RX** είναι παραδοσιακοί φακοί επαφής ετήσιας αντικατάστασης.

Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς τους είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι παράμετροι ώστε να εφαρμόζουν σε κάθε μάτι.

Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	54%
Καμπυλότητα (BC)	7.00 έως 9.90 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	11.0 έως 15.5 mm (ανά 0.10)
Σφαιρική ισχύς (SPH)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)
Διαπερατότητα Οξυγόνου Dk	23
Αντικατάσταση	Ετήσια
Συσκευασία	1 τεμάχιο

PROJECT TORIC (Rx)

Ετήσιας Αντικατάστασης



Οι **OPTIMAX PROJECT TORIC RX** είναι παραδοσιακοί φακοί επαφής ετήσιας αντικατάστασης.

Η καμπυλότητα, η διάμετρος και η ισχύς τους είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν σε κάθε μάτι καλύπτοντας και αστιγματισμό.

Υλικό	Hioxifilcon D
Περιεκτικότητα σε νερό	54%
Καμπυλότητα (BC)	77.00 έως 9.90 mm (ανά 0.05)
Διάμετρος (DIAM)	11.0 έως 15.5 mm (ανά 0.10)
Σφαιρική ισχύς (SPH)	-35.00 έως +35.00 (ανά 0.25)
Κυλινδρική ισχύς (CYL)	-0.25 έως -7.00 (ανά 0.25)
Άξονας	1 έως 180 (ανά 1°)
Διαπερατότητα Οξυγόνου Dk	23
Αντικατάσταση	Ετήσια
Συσκευασία	1 τεμάχιο



Οι φακοί επαφής ετήσιας αντικατάστασης συστήνεται να καθαρίζονται κάθε βράδυ με το υγρό υπεροξειδίου του υδρογόνου **ECOSYSTEM PEROXIDE** και να ξεπλένονται πριν τη χρήση με το φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα **ECOSYSTEM SALINE**.

OPTIMAX GP

Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής



Η οικογένεια των σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής **OPTIMAX GP** αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Πρόκειται για εξατομικευμένους φακούς επαφής νέας γενιάς που κατασκευάζονται με τόρνο. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι με δυνατότητα επιλογής των διοπτριών, της καμπυλότητας, της διαμέτρου, του γεωμετρικού σχεδιασμού και της πρώτης ύλης. Κατασκευάζονται σε σφαιρικούς, ασφαιρικούς, τορικούς και κερατοκωνικούς.

Ο χαμηλός συντελεστής τριβής ελαχιστοποιεί την αλληλεπίδραση με τα βλέφαρα έχοντας σαν αποτέλεσμα μία άνετη εφαρμογή. Η δυνατότητα επιλογής υλικών υψηλής διαπερατότητας εξασφαλίζουν μία υγιή και απροβλημάτιστη εφαρμογή. Ο ασφαιρικός σχεδιασμός εξασφαλίζει διευρυμένη οπτική ζώνη και ομαλότερη ροή των δακρύων κάτω από τον φακό.

	Υλικά	Καμπυλότητα	Διάμετρος	Σφαιρώμα	
OPTIMAX GP TRICURVE	DK 30 μπλε, πράσινο, γκρι, διάφανο DK 60 Μπλε, πράσινο DK100 μπλε, γαλάζιο, πράσινο	5.00 έως 12.00 (0.05)	6.00 έως 12.60 (0.10)	+35.00 έως -35.00 (0.25)	
OPTIMAX GP ASPHERIC					Asphericity 0.5
OPTIMAX GP TORIC					-0.50 έως -12.00 (0.50)
OPTIMAX GP KERATOCONUS					Προφίλ KA Προφίλ KB

Επιλογή ακτίνας καμπυλότητας για σκληρούς αεροδιαπερατούς φακούς

Σφαιρικοί - Ασφαιρικοί $\varnothing 9.40$		Μεγάλης Διαμέτρου $\varnothing 10.40$		Κερατοκωνικοί	
Αστιγματισμός Κερατοειδή	Ακτίνα Καμπυλότητας	Αστιγματισμός Κερατοειδή	Ακτίνα Καμπυλότητας	Αστιγματισμός Κερατοειδή	Ακτίνα Καμπυλότητας
0.00 έως 0.50 D	Flat K + 0.05mm	0.00 έως 0.50 D	Flat K + 0.10mm	0.75 έως 1.25 D 1.50 έως 2.00 D 2.25 έως 3.25 D 3.50 και άνω	Flat K - 0.10mm Flat K - 0.15mm Flat K - 0.20mm Flat K - 0.30mm
0.75 έως 1.25 D	Flat K	0.75 έως 1.25 D	Flat K + 0.05mm		
1.50 έως 2.00 D	Flat K - 0.05mm	1.50 έως 2.00 D	Flat K		
2.25 έως 2.75 D	Flat K - 0.10mm*	2.25 έως 2.75 D	Flat K - 0.05mm*		
3.00 έως 3.50 D	Flat K - 0.15mm*	3.00 έως 3.50 D	Flat K - 0.10mm*		


Flat K = Επίπεδος μεσημβρινός, Steep K = Κυρτός μεσημβρινός

* Συνίσταται επιλογή τορικού σχεδιασμού


Τορικός Σχεδιασμός: K1 = Flat K + 0.05mm | K2 = Steep K + 0.20mm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPTIMAX GP


Καλή εφαρμογή

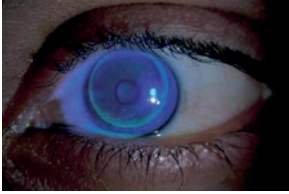

Σφικτή εφαρμογή

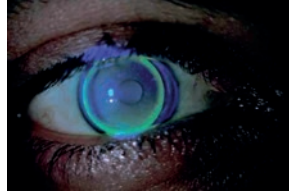


Χαλαρή εφαρμογή

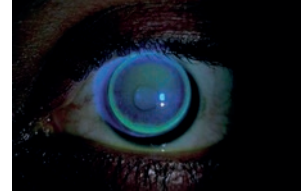


Επιλέγουμε τον πρώτο φακό χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο πίνακα και τον εφαρμόζουμε. Μετά από 15 λεπτά εκτιμούμε την εφαρμογή με χρήση φλουορεσκεινης και κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι με την εφαρμογή προχωράμε στην επιδιάθλαση για την επιλογή της τελικής ισχύος του φακού που θα παραγγείλουμε. Σε περιπτώσεις εμπειρικής εφαρμογής, δηλαδή εφαρμογής χωρίς την χρήση διαγνωστικού σετ, απαιτείται συνταγή γυαλιών, καμπυλότητες και διάμετρος κερατοειδούς. Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει με τα υπόλοιπα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPTIMAX GP KERATOCONUS


Καλή εφαρμογή

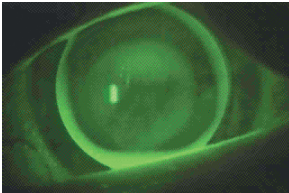

Σφικτή εφαρμογή

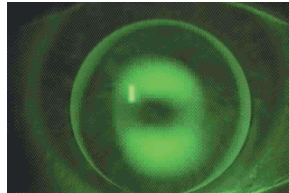

Χαλαρή εφαρμογή

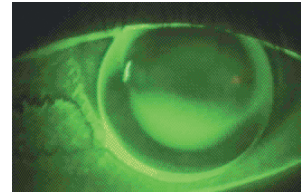

Στις περιπτώσεις κερατόκωνου είναι απαραίτητη η δοκιμή διαγνωστικών φακών με χρήση φλουορεσκεινης για την εκτίμηση της εφαρμογής του φακού. Σαν σημείο εκκίνησης μπορεί να επιλεγεί καμπυλότητα φακού σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα. Με το πέρας 15 λεπτών παρατηρούμε την εφαρμογή και κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές μέχρι να είμαστε ικανοποιημένοι από την εφαρμογή. Στην συνέχεια προχωράμε στην επιδιάθλαση για την επιλογή της κατάλληλης ισχύος.

Η **OPTIMAX** διαθέτει διαγνωστικά σετ τα οποία αποστέλλονται δωρεάν στον εφαρμοστή με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου φακού επαφής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί για όλες τις ειδικές εφαρμογές παρέχετε τεχνική βοήθεια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικής εφαρμογής η εταιρία μας μπορεί να υπολογίσει τον κατάλληλο φακό λαμβάνοντας από τον εφαρμοστή φακών τα παρακάτω δεδομένα, πρόσφατη συνταγή γυαλιών, καμπυλότητες και διάμετρος κερατοειδούς (εξαιρούνται περιπτώσεις κερατόκωνου).



Οι σκληροί αεροδιαπερατοί φακοί επαφής (ημίσκληροι) συστήνεται να καθαρίζονται με τον συνδυασμό ECOSYSTEM CONDITIONER και ECOSYSTEM CLEANER.



ΥΓΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Το **ECOSYSTEM All in One** είναι ένα διάλυμα πλήρους φροντίδας κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των μαλακών φακών επαφής. Έχει ισχυρή απολυμαντική δράση και παρέχει διπλή ασφάλεια χάρη στην εσωκλειόμενη αντιμικροβιακή θήκη φακών επαφής με ιόντα αργύρου. Οι παράγοντες αφαίρεσης πρωτεϊνικών εναποθέσεων καθαρίζουν την επιφάνεια των φακών και το υαλουρονικό παρέχει αξεπέραστη ενυδάτωση για περισσότερες ώρες άνετης χρήσης των φακών επαφής. Διαθέσιμο σε συσκευασίες των **360ml** και **100ml**.

Αξεπέραστη ενυδάτωση
με υαλουρονικό

Ισχυρή απολυμαντική δράση
συν παράγοντες αφαίρεσης πρωτεϊνών

Αντιμικροβιακή θήκη
φακών επαφής
με ιόντα αργύρου



eco SYSTEM

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Οι **ECOSYSTEM OXYGEN** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας γενιάς, σχεδιασμένοι για να προσφέρουν εξαιρετική άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου, επιτρέπουν στα μάτια να αναπνέουν φυσικά, διατηρώντας τα καθαρά, λευκά και ξεκούραστα ακόμη και μετά από πολλές ώρες χρήσης.


Τα ενσωματωμένα φίλτρα UV παρέχουν ένα ακόμα επίπεδο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο προηγμένος σχεδιασμός τους προσφέρει σταθερή, καθαρή όραση, ενώ η τεχνολογία διατήρησης υγρασίας συμβάλλει στην πρόληψη της ξηρότητας, καθιστώντας τους ιδανικούς για άτομα με ξηροφθαλμία ή ευαίσθητα μάτια.

Υλικό	Silicone Hydrogel
Περιεκτικότητα σε νερό	50%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.1 mm
Ισχύς (POWER)	-1.00 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -10.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου (Dk/t)	114
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	6 τεμάχια



IDEAL[®] VISION

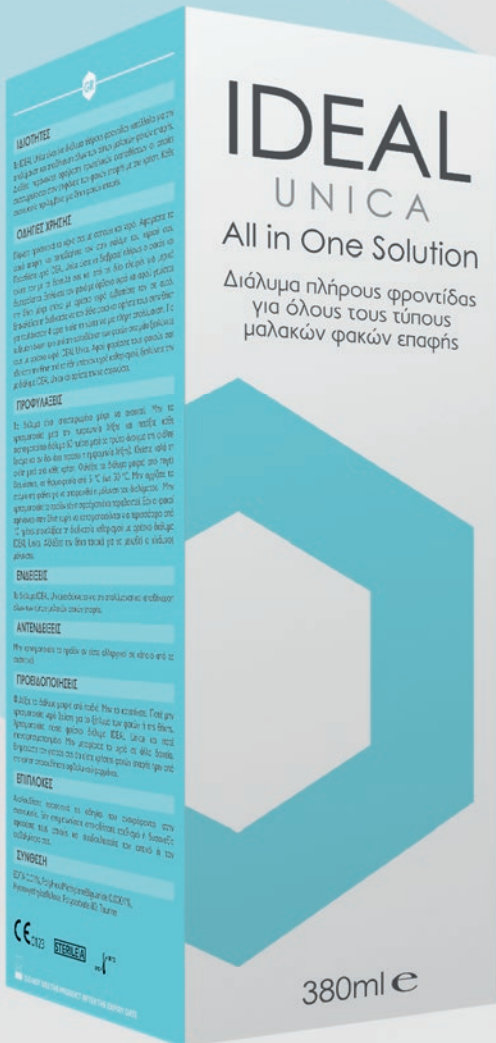

**IDEAL
UNICA**

All in One Solution

Διάλυμα πλήρους φροντίδας
για όλους τους τύπους
μαλακών φακών επαφής

380ml e



**IDEAL
UNICA**

All in One Solution

Διάλυμα πλήρους φροντίδας
για όλους τους τύπους
μαλακών φακών επαφής

380ml e

ΥΓΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Το **IDEAL UNICA** είναι ένα διάλυμα πλήρους φροντίδας κατάλληλο για την απολύμανση και αποθήκευση όλων των τύπων μαλακών φακών επαφής.

Διαθέτει παράγοντες αφαίρεσης πρωτεϊνικών εναποθέσεων οι οποίες συσσωρεύονται στην επιφάνεια των φακών επαφής με τη χρήση.

Διαθέσιμο σε συσκευασία των **380ml**.



ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ

Οι **IDEAL ASPHERIC** είναι μηνιαίοι φακοί επαφής υδρογέλης.

Τα ενσωματωμένα φίλτρα UV παρέχουν ένα ακόμα επίπεδο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο ασφαιρικός σχεδιασμός προσφέρει έλεγχο οπτικών εκτροπών με αποτέλεσμα καθαρή όραση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Υλικό	Methafilcon A
Περιεκτικότητα σε νερό	55%
Καμπυλότητα (BC)	8.60 mm
Διάμετρος (DIAM)	14.2 mm
Ισχύς (POWER)	-0.75 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -15.00 (0.50) +1.00 έως +4.00 (0.25) +4.50 έως +6.00 (0.50)
Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t	22
Φίλτρο UV	ΝΑΙ
Απόχρωση	Γαλάζια
Αντικατάσταση	Μηνιαία
Συσκευασία	6 τεμάχια

eco SYSTEM

PEROXIDE



Διάλυμα Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

Το **ECOSYSTEM PEROXIDE** είναι ένα διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου για την απολύμανση των μαλακών φακών επαφής και των σκληρών φακών επαφής. Αποτελεί κορυφαία επιλογή με πολύ ισχυρή απολυμαντική δράση σε ένα μεγάλο εύρος μικροοργανισμών. Απομακρύνει τις πρωτεϊνικές και λιπώδες εναποθέσεις από την επιφάνεια των φακών επαφής και επιτρέπει την ομοίομορφη διαβροχή τους με αποτέλεσμα την αυξημένη άνεση κατά την χρήση. Η εξουδετέρωση επιτυγχάνετε από τον δίσκο πλατίνας που βρίσκεται ενσωματωμένος στην θήκη. Κάθε συσκευασία περιέχει μία νέα θήκη φακών.

Διατίθεται σε συσκευασία των 360ml.

OPTIMAX

optimum vision - maximum comfort



ECOSYSTEM CONDITIONER

Υγρό Συντήρησης Σκληρών Αεροδιαπερατών Φακών Επαφής



Το **ECOSYSTEM CONDITIONER** είναι ένα υγρό συντήρησης σκληρών αεροδιαπερατών φακών επαφής με ισχυρή απολυμαντική δράση σε ένα μεγάλο εύρος μικροοργανισμών. Έχει συμβατό pH με τα σωματικά υγρά και τους οφθαλμικούς ιστούς που έρχεται σε επαφή. Η σύνθεση του βοηθάει στην ομοιόμορφη διαβροχή των φακών με αποτέλεσμα την αυξημένη αίσθηση άνεσης κατά την χρήση.

Διατίθεται σε συσκευασία των 250ml.

ECOSYSTEM CLEANER

Σαπουνάκι Καθαρισμού Σκληρών Αεροδιαπερατών Φακών Επαφής



Το **ECOSYSTEM CLEANER** είναι ένα σαπουνάκι καθαρισμού σκληρών αεροδιαπερατών φακών επαφής. Έχει ισχυρή καθαριστική δράση και είναι ένα απαραίτητο βήμα για τον σε βάθος καθημερινό καθαρισμό των φακών επαφής. Επιφανειοδραστικά μόρια αφαιρούν τις επιφανειακές εναποθέσεις (λιπίδια, πρωτεΐνες, κλπ) επιτρέποντας την ομοιόμορφη διαβροχή των φακών με αποτέλεσμα την αυξημένη αίσθηση άνεσης κατά την χρήση.

Διατίθεται σε συσκευασία των 60ml.

ECOSYSTEM SALINE

Φυσιολογικό Αλατούχο Διάλυμα



Το **ECOSYSTEM SALINE** είναι ένα φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα κατάλληλο για την έκπλυση όλων των τύπων φακών επαφής. Έχει συμβατό pH με τα σωματικά υγρά και τους οφθαλμικούς ιστούς που έρχεται σε επαφή. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστά το υγρό καθαρισμού.

Διατίθεται σε συσκευασία των 550ml.



STAND ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιέχει από 2 τεμάχια ECOSYSTEM PEROXIDE, ECOSYSTEM CONDITIONER, ECOSYSTEM CLEANER, ECOSYSTEM SALINE.



ΓΙΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ

Αντιβακτηριακή Μάσκα Ματιών | Αυτοθερμαινόμενη Μάσκα Ματιών
Βιοδιασπώμενα Μαντηλάκια για τα βλέφαρα

OPTIMAX
optimum vision - maximum comfort

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ;

Το σύνδρομο της Ξηροφθαλμίας ή αλλιώς Ξηροφθαλμία είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται όταν τα μάτια δεν παράγουν αρκετά δάκρυα ή τα δάκρυα εξατμίζονται πολύ γρήγορα. Αυτό οδηγεί σε ξηρότητα και φλεγμονή (κοκκίνισμα και πρήξιμο) και ερεθισμό των ματιών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ;

Η βλεφαρίτιδα είναι μια φλεγμονή των βλεφάρων που επηρεάζει τις άκρες (χειλός) των βλεφάρων. Συνήθως δεν είναι σοβαρή, αλλά μπορεί να γίνει μια ενοχλητική και δυσάρεστη κατάσταση. Η βλεφαρίτιδα είναι τυπικά χρόνια (επίμονη) και συνήθως επηρεάζει και τα δύο μάτια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MGD;

MGD (Δυσλειτουργία των Μείβομιανών Αδένων) είναι η πιο συχνή μορφή νόσου του χειλούς των βλεφάρων. Στα αρχικά στάδια, οι ασθενείς είναι συχνά ασυμπτωματικοί, αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί, η MGD μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα ξηροφθαλμίας και τη φλεγμονή των βλεφάρων.


Οι μείβομιανοί αδένες φράσσονται από πηκτές εκκρίσεις. Η χρόνια απόφραξη των αδένων οδηγεί τελικά σε αδυναμία παραγωγής λιπαρών ουσιών, με αποτέλεσμα μόνιμες αλλοιώσεις στη δακρυϊκή στιβάδα και ξηροφθαλμία.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ;



ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Τα δάκρυα λειτουργούν καλύτερα όταν μια λεπτή ελαιώδη στιβάδα καλύπτει την επιφάνειά τους αποτρέποντας την υπερβολική εξάτμισή τους. Αυτό το έλαιο προέρχεται από αδένες στα βλέφαρα. Ένα βασικό σύμπτωμα της Ξηροφθαλμίας εμφανίζεται όταν τα έλαια γίνουν παχύρρευστα, μεταβαίνοντας από τη φυσιολογική λεία σε μια πιο κρεμώδη υφή.

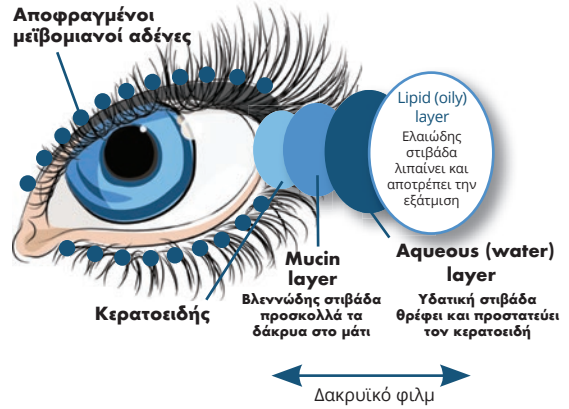

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 3 ΒΗΜΑΤΑ:

- 1 Θέρμανση των βλεφάρων εξωτερικά – με την χρήση της μάσκα ματιών The Eye Doctor σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό θα επιτρέψει στο κρεμώδες έλαιο να λιώσει και να γίνει και πάλι ρευστό.
- 2 Μασάζ στα βλέφαρα – για να βγει μέρος του λιωμένου ελαίου από τους αδένες ακολουθώντας τη διαδικασία του μασάζ βλεφάρων, επιτρέποντας στους αδένες να παράγουν ξανά υγιές έλαιο.
- 3 Καθαρισμός της βάσης των βλεφαρίδων – αυτό μειώνει τη συσσώρευση βακτηρίων που μπορεί να ευθύνονται για κάποια από τα συμπτώματα.

Οι μάσκες ματιών The Eye Doctor μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμό ή ψυχρό επίθεμα.

ΘΕΡΜΗ ΧΡΗΣΗ

Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων από:

- + Ξηροφθαλμία
- + Δυσλειτουργία Μείβομιανών Αδένων
- + Χαλάζιο

ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ

Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων από:

- + Αλλεργική ρινίτιδα / Αλλεργίες / Φλεγμονή
- + Κουρασμένα / Κνηστώδη / Πρησμένα / Ερεθισμένα μάτια
- + Πονοκεφάλους ιγμορίτιδας / Ημικρανία

Μάσκα Ματιών The Eye Doctor Essential

Η Αντιβακτηριακή Μάσκα Ματιών **The Eye Doctor Essential**® είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο θερμό* και ψυχρό επίθεμα ματιών που βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων μιας σειράς οφθαλμικών παθήσεων και επιπλοκών, όπως η Ξηροφθαλμία, η Δυσλειτουργία των Μείβομιανών Αδένων (MGD) και η Βλεφαρίτιδα.

Χάρη στην τεχνολογία self-hydrating **BodyBeads**™, το **The Eye Doctor Essential**® αποτελεί έναν φυσικό τρόπο καταπράυνσης συμπτωμάτων που προκαλούνται από διάφορες οφθαλμικές παθήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από 200 φορές.

Το **The Eye Doctor Essential**® μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κρύο για να καταπραΰνει και να ηρεμήσει τα κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια.

* απαιτεί φούρνο μικροκυμάτων



ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΜΑΣΚΑ;

Οι περισσότεροι ασθενείς ωφελούνται από την εφαρμογή θερμού επιθέματος ματιών και τη μάλαξη δύο φορές την ημέρα για διάστημα δύο εβδομάδων. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί σε μία φορά την ημέρα και, αφού τα συμπτώματα υποχωρήσουν, σε μερικές φορές την εβδομάδα. Είναι σημαντικό να πραγματοποιείται η μάλαξη σωστά ώστε να απομακρύνονται οι εκκρίσεις που έχουν μαλακώσει από τη θερμότητα του θερμού επιθέματος ματιών. Η κρύα θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιείται όσο συχνά και για όσο διάστημα αισθάνεστε άνετα.



ΘΕΡΜΗ ΧΡΗΣΗ

για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:



Ξηροφθαλμία

Αποκαθιστά την υγρασία στα μάτια



MGD

Καθαρίζει τους φραγμένους αδένες των βλεφάρων



Βλεφαρίτιδα

Βοηθά στη διατήρηση της δακρυϊκής μεμβράνης

ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ

για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:

+ Πονοκέφαλοι + Ημικρανίες + Αλλεργίες + Πρησμένα μάτια



Αυτοθερμενόμενη Μάσκα Ματιών The Eye Doctor Click & GO


Η Αυτοθερμενόμενη και Αντιβακτηριακή Μάσκα Ματιών **The Eye Doctor Click & GO®** είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο θερμό* και ψυχρό επίθεμα ματιών που βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων μιας σειράς οφθαλμικών παθήσεων και επιπλοκών, όπως η Ξηροφθalmία, η Δυσλειτουργία των Μείβομαιών Αδένων (MGD) και η Βλεφαρίτιδα.

Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται οπουδήποτε και δεν απαιτεί φούρνο μικροκυμάτων για να θερμανθεί. Το **The Eye Doctor Click & GO®** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κρύο για να καταπραύνει και να ηρεμήσει τα κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια.

* Δεν απαιτεί φούρνο μικροκυμάτων



Συνηθισμένες Μάσκες

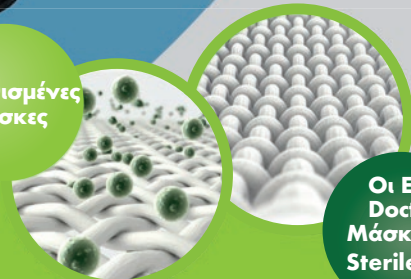

Οι Eye Doctor Μάσκες με Sterileyes®

Οι μάσκες ματιών **The Eye Doctor** διαθέτουν την πατενταρισμένη τεχνολογία Sterileyes®, η οποία λειτουργεί ως αντιβακτηριακή ασπίδα και έχει κλινικά αποδειχθεί ότι μειώνει τα δυνητικά επιβλαβή βακτήρια έως και 99,99%. Η τεχνολογία POLYGIENE™ Stay-Fresh, είναι δεσμευμένη στις ίνες του υφάσματος της μάσκας, προστατεύοντας τα μάτια από δυνητικά επιβλαβή βακτήρια. Το ύφασμα αυτό είναι αντιμικροβιακό έναντι των τριών κυριότερων μικροοργανισμών που προκαλούν οφθαλμικές λοιμώξεις και σχετίζονται με την ανάπτυξη της Ξηροφθalmίας.

sterileyes®
PATENTED TECHNOLOGY

Sterileyes® Antibacterial Protection

Το Sterileyes® είναι μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντιβακτηριακή επίστρωση στην κομπρέσα, μόνιμα δεσμευμένη στις ίνες του υφάσματος και κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τα δυνητικά επιβλαβή βακτήρια στην επιφάνεια της κομπρέσας μετά τη χρήση έως και 99,9%.

Αυτή η κατοχυρωμένη, διατηρούμενη φρέσκια και φιλική προς το δέρμα τεχνολογία αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν οσμές στη επιφάνεια της κομπρέσας.

Το Sterileyes δεν επηρεάζει τη φυσική βακτηριακή χλωρίδα του δέρματος.

Διατηρείται καθαρή:

Αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν οσμές

Εγγύηση:

Μακροχρόνια προστατευτική ασπίδα

Φιλική προς το δέρμα:

Προσφέρει προστασία χωρίς να προκαλεί ερεθισμό



Αριθμός βρετανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας GB2561707.

TO STERILEYES® ΜΕΙΩΝΕΙ 99,9% ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ



Μαντηλάκια Καθαρισμού Βλεφάρων The Eye Doctor Eyelid Wipes

Τα μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων The Eye Doctor Eyelid Wipes είναι προεμποτισμένα, βιοδιασπώμενα και χωρίς συντηρητικά. Είναι κατάλληλα για ευαίσθητα μάτια και προσφέρουν μια αποτελεσματική και απαλή λύση για την καθημερινή υγιεινή των βλεφάρων.

Πώς λειτουργούν τα μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων;

Τα μαντηλάκια είναι ιδανικά για την απομάκρυνση ρύπων και υπολειμμάτων από τα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες χωρίς να προκαλούν ερεθισμό. Η σύνθεση χωρίς σαπούνι και χωρίς ανάγκη ξεβγάλματος διατηρεί το λιπιδικό στρώμα του δακρυϊκού φιλμ, το οποίο είναι απαραίτητο για τη μείωση της εξάτμισης των δακρύων. Χωρίς αυτό το στρώμα, τα μάτια μπορεί να γίνουν πολύ ξηρά και ερεθισμένα.

Τα μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων συνιστάται να χρησιμοποιούνται δύο φορές την ημέρα – πρωί και βράδυ – ως μέρος της καθημερινής ρουτίνας υγιεινής των βλεφάρων.



Κατάλληλα για χρήση με



Ξηροφθαλμία

Κατάλληλο για ευαίσθητα βλέφαρα



Βλεφαρίτιδα

Καθαρίζει τα βακτήρια



MGD

Καταπραΰνει και ηρεμεί

Καθημερινή υγιεινή βλεφάρων



Καταπραΰνει τους ερεθισμούς των ματιών



Καθαρίζει τη βρωμιά



Αναζωογονεί και καθαρίζει

STAND ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιέχει
2 τεμάχια **The Eye Doctor Essential® Mask**
3 τεμάχια **The Eye Doctor Click & GO® Mask**
2 τεμάχια **The Eye Doctor Eyelid Wipes**



OPTIMAX

optimum vision - maximum comfort



ΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ **ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙΣΤΕ ΤΑ ΞΗΡΑ ΜΑΤΙΑ**



Οι οφθαλμικές σταγόνες **ECOSYSTEM Eye Drops** χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση των ματιών. Λιπαίνουν και δίνουν μία αίσθηση άμεσης και διαρκούς ανακούφισης. Είναι ιδανικές για χρήση με φακούς επαφής αποκαθιστώντας το επιθυμητό επίπεδο διαβροχής. Χάρη στις έντονες βιοσκοελαστικές ιδιότητες του Υαλουρονικού βελτιώνετε η βιοσυμβατότητα και η λίπανση κατά την χρήση φακών επαφής. Διατίθεται σε συσκευασία των 15ml.



STAND ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιέχει 12 τεμάχια ECOSYSTEM EYE DROPS.

Συμπληρωματική φροντίδα & αξεσουάρ



DMV Ultra

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σκληρικών και σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής.



DMV 45

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σκληρικών και σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής. Η γωνία 45 μοιρών επιτρέπει την χρήση χωρίς να κρύβει τον καθρέπτη.



DMV Classic

Κατάλληλο για τοποθέτηση και αφαίρεση σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής. Κατάλληλο και για ορθοκερατολογία.



DMV Scleral Cup

Χρησιμοποιείται κυρίως για την τοποθέτηση σκληρικών φακών επαφής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση υβριδικών φακών καθώς και την τοποθέτηση και αφαίρεση τεχνητών οφθαλμών.



DMV Vented Scleral Cup

Το DMV Vented Scleral Cup χρησιμοποιείται κυρίως για την τοποθέτηση σκληρικών φακών επαφής, υβριδικών φακών και τεχνητών οφθαλμών. Σε αντίθεση με το DMV Scleral Cup το συγκεκριμένο προϊόν είναι αεριζόμενο αποτρέποντας την αναρρόφηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το DMV Scleral Stand.



DMV Soft

Κατάλληλο για τοποθέτηση και αφαίρεση μαλακών φακών επαφής. Ιδανικό για περιπτώσεις δυσκολίας χειρισμού και χρήστες με μακριά νύχια. Χρήσιμο επίσης σε περιπτώσεις περιστασιακής χρήσης, τραχιών χεριών, γλιστερών υλικών και λεπτών φακών.



DMV Versa

Συνδυάζει την δυνατότητα τοποθέτησης και αφαίρεσης σκληρικών φακών επαφής σε ένα. Η μία άκρη του προϊόντος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση σκληρικών φακών και η άλλη για την αφαίρεση σκληρικών φακών.



DMV Luma-Serter Plus

κατάλληλο για την τοποθέτηση σκληρικών φακών και υβριδικών φακών επαφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το DMV Penlight δημιουργώντας ένα φωτεινό σημείο προσήλωσης διευκολύνοντας στην σωστή επικέντρωση των φακών. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί στο δάχτυλο βελτιώνοντας την επιδεξιότητα κατά την τοποθέτηση των φακών.

Βεντουζάκια κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από φυσικό καουτσούκ με υποαλλεργική μέθοδο. Με Πιστοποίηση CE.

Θήκη Απλή



Θήκη Όρθια



Αντιμικροβιακή Θήκη



Θήκη Σκληρών Φακών



Συμπληρωματική φροντίδα & αξεσουάρ

DMV Penlight



Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το DMV Luma Sertter Plus για να δημιουργήσει ένα φωτεινό σημείο προσήλωσης διευκολύνοντας στην σωστή επικέντρωση των σκληρικών και των υβριδικών φακών κατά την τοποθέτησή τους στο μάτι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κορικών αντανάκλαστικών.



DMV Scleral Stand

Το DMV Scleral Stand χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση σκληρικών φακών επαφής. Επιτρέπει την τοποθέτηση φακών χωρίς χέρια. Το DMV Scleral Stand χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το DMV Vented Scleral Cup το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Η βάση του Scleral Stand απορροφάει το φως και χρησιμοποιούμενη σε συνδυασμό με έναν φακό δημιουργεί ένα φωτεινό στόχο προσήλωσης βοηθώντας στην σωστή επικέντρωση των φακών επαφής.



Lens Catch

Το Lens Catch είναι μία οβάλ προστατευτική μεμβράνη που τοποθετείτε στην αποχέτευση του νιπτήρα επιτρέποντας τα υγρά να την διαπερνούν αλλά όχι τους φακούς επαφής σε περίπτωση που πέσουν από τα χέρια του χρήστη κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση ή την διαδικασία καθαρισμού.



Tweezer

Τσιμπίδα με άκρες σιλικόνης κατάλληλη για τον χειρισμό φακών επαφής. Διαθέσιμη σε δύο μεγέθη.



Μεγεθυντικός Καθρέπτης

Μεγεθυντικός καθρέπτης με βεντούζα. Προσφέρει μεγέθυνση 10X και διαθέτει φωτισμό led. Για διευκόλυνση της τοποθέτησης των φακών μπορεί να περισταφεί 360°. Δεν χρειάζεται βίδαμα.

Φλουορεσκεΐνη



Κάθε συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια.
Προϊόν με Πιστοποίηση CE.

Αποστειρωμένες διαγνωστικές ταινίες εμποτισμένες με 1.0mg Φλουορεσκεΐνης.

Ενδείξεις Χρήσης

- Εφαρμογή φακών επαφής
- Αξιολόγηση χρόνου διάσπασης δακρυϊκής στοιβάδας
- Αξιολόγηση οφθαλμικής επιφάνειας
- Τονομέτρηση επιπέδωσης

Schirmer Tear Test



Κάθε συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια.
Προϊόν με Πιστοποίηση CE.

Αποστειρωμένες διαγνωστικές ταινίες Schirmer Test από φίλτρο Whatman No 41. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της παραγωγής των δακρύων. Κάθε ταινία έχει μια τυπωμένη κλίμακα σε χιλιοστά στην οποία έχει προστεθεί μπλε χρωστική ουσία. Κατά τον εμποτισμό της ταινίας με δάκρυα η χρωστική αφήνει αποτύπωμα κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του αποτελέσματος. Η χρωματισμένη ταινία μπορεί να διατηρηθεί για σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ εξετάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΓΥΑΛΙΩΝ – ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
VERTEX DISTANCE

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ (12mm)	ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΥΩΠΙΑ	ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
4.00	-3.75	+4.25
4.25	-4.00	+4.50
4.50	-4.25	+4.75
4.75	-4.50	+5.00
5.00	-4.75	+5.25
5.25	-5.00	+5.50
5.50	-5.25	+5.75
5.75	-5.50	+6.00
6.00	-5.75	+6.50
6.25	-5.75	+6.75
6.50	-6.00	+7.00
6.75	-6.25	+7.25
7.00	-6.50	+7.50
7.50	-7.00	+7.75
8.00	-7.25	+8.25
8.50	-7.75	+9.50
9.00	-8.00	+10.00
9.50	-8.50	+10.75
10.00	-9.00	+11.25
10.50	-9.25	+12.00
11.00	-9.75	+12.75
11.50	-10.00	+13.25
12.00	-10.50	+14.00
12.50	-10.75	+14.75
13.00	-11.25	+15.50
13.50	-11.50	+16.00
14.00	-12.00	+16.75
14.50	-12.25	+17.50
15.00	-12.75	+18.25
15.50	-13.00	+19.00
16.00	-13.50	+19.75
16.50	-13.75	+20.50
17.00	-14.00	+21.50
17.50	-14.50	+22.25
18.00	-14.75	+23.00
18.50	-15.00	+23.75
19.00	-15.50	+24.75
19.50	-15.75	+25.50
20.00	-16.00	+26.25

Τα προϊόντα αντιμετώπισης της Ξηροφθαλμίας



είναι πλέον διαθέσιμα και στην Ελλάδα



Life. Health. Wellness.

OPTIMAX
optimum vision - maximum comfort

THE BODY DOCTOR.

OPTIMAX[®]
optimum vision - maximum comfort

eco
SYSTEM


IDEAL


QUEEN'S[™]
BEAUTY LENSES


theeyedoctor⁺